


Avaz Manuale



10 minuti di introduzione alle caratteristiche
di Avaz

Avaz - Modalità iconica

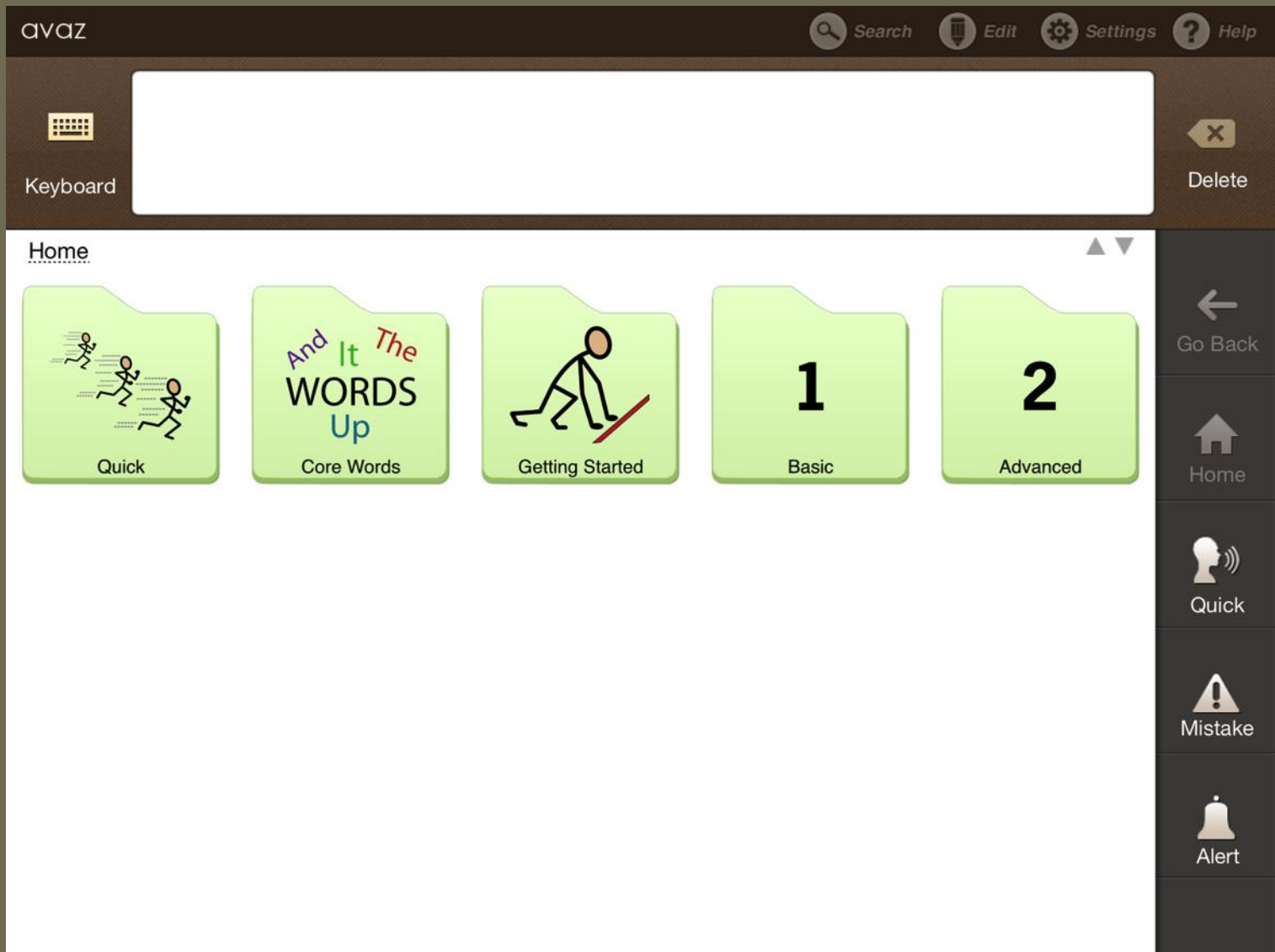

Questa è la pagina iniziale di Avaz in modalità iconica. Avaz include set di simboli adatti a diverse fasce d'età, suddivisi in tre livelli. Puoi impostare una qualsiasi delle categorie come pagina iniziale.

Categorie e messaggi

avaz Search Edit Settings Help

Keyboard   I  like  to  play  drums  Delete

Home → Advanced

 I	 you	 that	 do	 go
 is	 like	 want	 to	 not
 food	 indoor	 places	 people	 questions

Go Back  Home  Quick  Mistake  Alert

La schermata contiene sia le categorie (cartelle verdi), sia messaggi (cartelle beige). Seleziona una categoria per vedere quali elementi contiene (messaggi e sottocategorie ulteriori).

Composizione frasi

The screenshot shows the AVAZ app interface. At the top, there is a navigation bar with 'avAZ' on the left and 'Search', 'Edit', 'Settings', and 'Help' on the right. Below this is a 'Keyboard' section. A red box highlights a sentence construction area containing four icons: a stick figure, a stick figure pointing to a red square, a red arrow, and a stick figure playing a guitar. Below these icons are the words 'I', 'want', 'to', and 'play'. To the right of this area is a 'Delete' button with an 'X' icon. Below the red box, there is a breadcrumb trail: 'Home → Advanced → indoor'. The main area contains a grid of 15 icons, each with a label: 'more', 'my turn', 'your turn', 'all done', 'something else', 'can I', 'play with toys', 'watch TV', 'listen to music', 'read books', 'build stuff', 'play board games', 'play indoor games', 'do sewing', and 'computer and devices'. On the right side, there is a vertical navigation bar with buttons: 'Go Back', 'Home', 'Quick', 'Mistake', and 'Alert'.

Seleziona una parola e allineala con altre per comporre le frasi. Tocca la cella col messaggio per ascoltare la frase composta.

Sviluppo del linguaggio

avaz Search Edit Settings Help

Keyboard I want to drink orange juice Delete

Home → Advanced → food

I drink eat like to

full hot hungry some thirsty

Mistake Alert

Il sistema di organizzazione di categorie e messaggi di Avaz favorisce lo sviluppo di competenze linguistiche. Insieme alla parola relativa all'oggetto concreto (es: succo d'arancia), al bambino vengono proposte le altre parole necessarie per comporre una frase completa.








Vocabolario esaustivo

The screenshot shows the Avaz app interface. At the top, there is a navigation bar with the app name 'avaz' on the left and icons for 'Search', 'Edit', 'Settings', and 'Help' on the right. Below the navigation bar is a large white text input field with a keyboard icon on the left and a 'Delete' button on the right. Below the input field, there are two tabs: 'Home' and 'Advanced'. The main content area displays a grid of eight green folder icons, each representing a different category of vocabulary. The folders are: 'questions' (two red question marks), 'time & calendar' (a calendar grid and a clock), 'actions' (stick figures performing various actions like riding a bicycle and using a hammer), 'position' (a red cube with various prepositions like 'Over', 'On', 'Upon', 'Within', 'In', 'Into', 'Beside', 'Near', 'By', 'Below', 'Beneath', 'Under'), 'describe' (a stick figure pointing to an apple with speech bubbles), 'categories' (a grid of icons representing different categories), 'chat' (two stick figures talking), and 'my topics' (a stack of folders with a green arrow pointing to the top one). The 'my topics' folder is highlighted with a red border. On the right side of the screen, there is a vertical sidebar with navigation buttons: 'Go Back' (left arrow), 'Home' (house icon), 'Quick' (head with sound waves), 'Mistake' (warning triangle), and 'Alert' (bell icon).



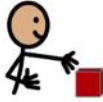












Avaz possiede un vocabolario di oltre 5000 parole. Un vocabolario contestuale specifico è contenuto nella cartella "I miei argomenti"

Codice colore

avaz Search Edit Settings Help

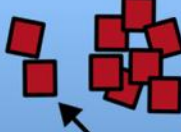Keyboard   I  want  to  drink  orange juice  Delete


Home → Advanced → food

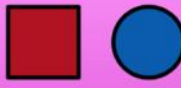 I	 drink	 eat	 like	 to
 full	 hot	 hungry	 some	 thirsty
 warm	 all done	 food	 something else	 can I have some more?

Go Back
Home
Quick
Mistake
Alert


In Avaz la codifica tramite il colore fornisce un aiuto visivo per l'identificazione dei termini da utilizzare e facilita il loro processo di apprendimento.

Pulsanti di navigazione

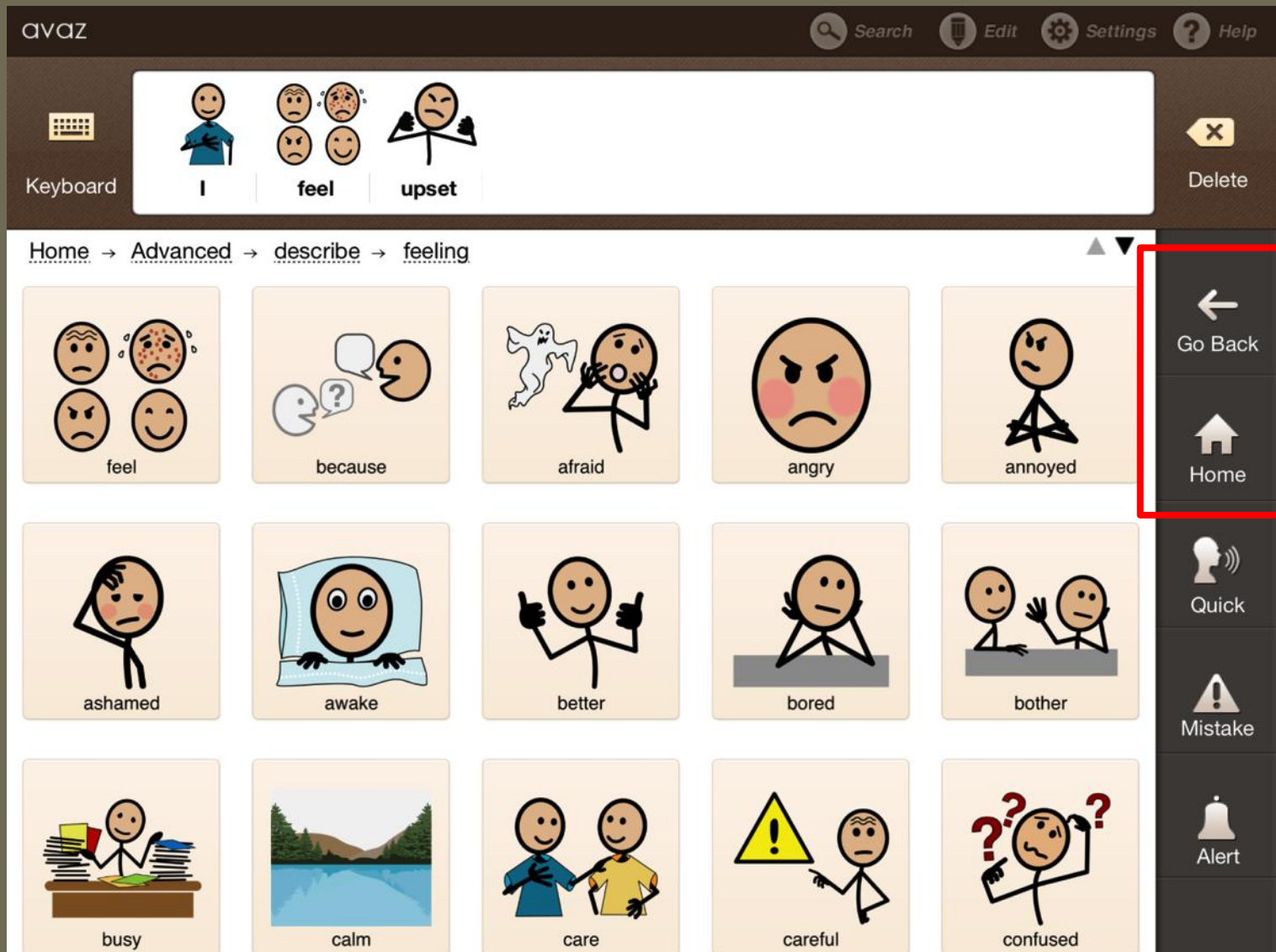


Premi il pulsante “Indietro” per tornare alla categoria di livello superiore, ed il pulsante “Inizio” per tornare alla schermata iniziale.

Pulsanti rapidi

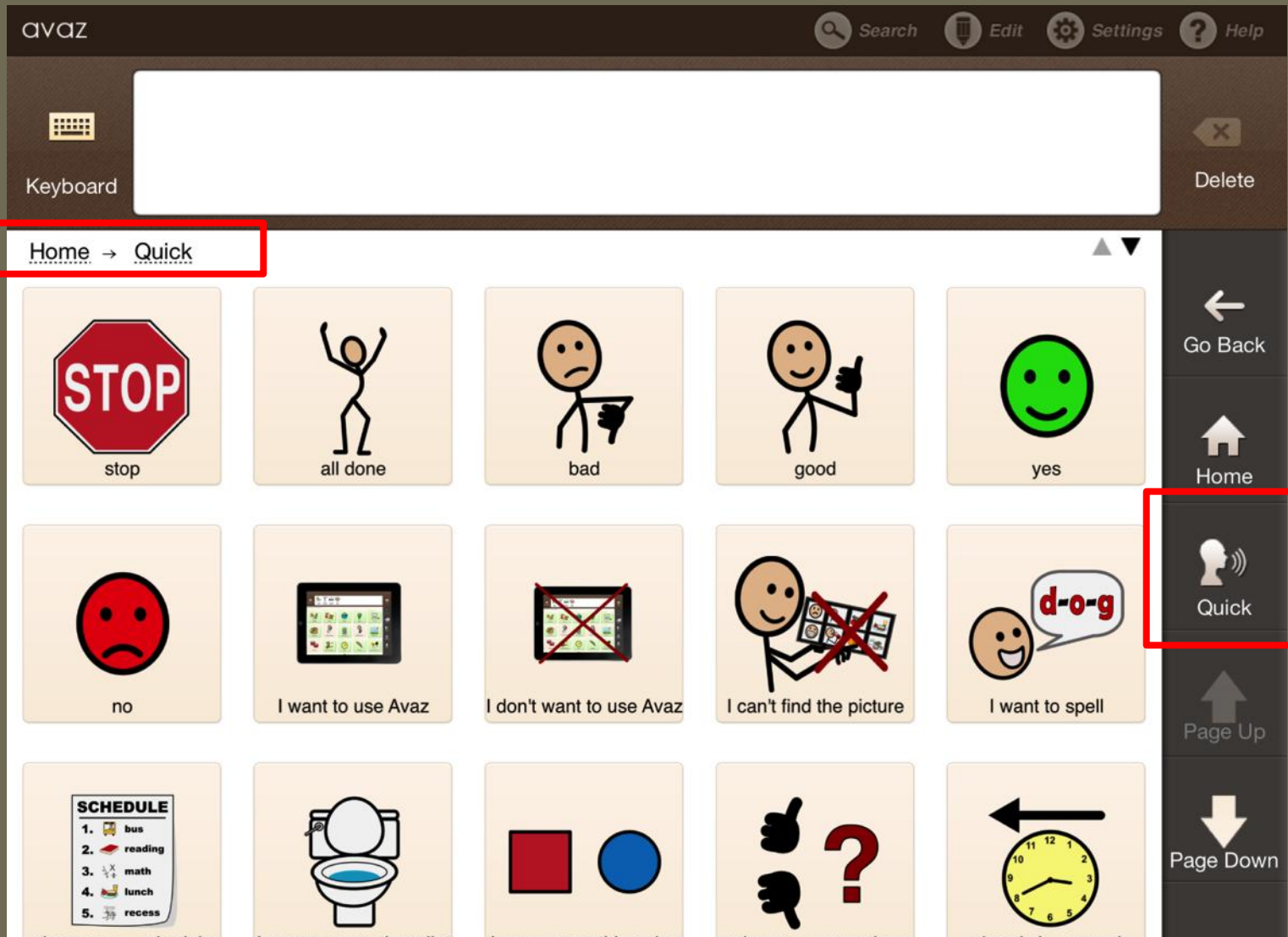


La categoria “Rapido” contiene messaggi utili per una comunicazione immediata. Il pulsante “Rapido” indirizza alla categoria “Rapido” della schermata principale, che contiene modelli pronti all’uso e frasi veloci.

Pulsanti di navigazione

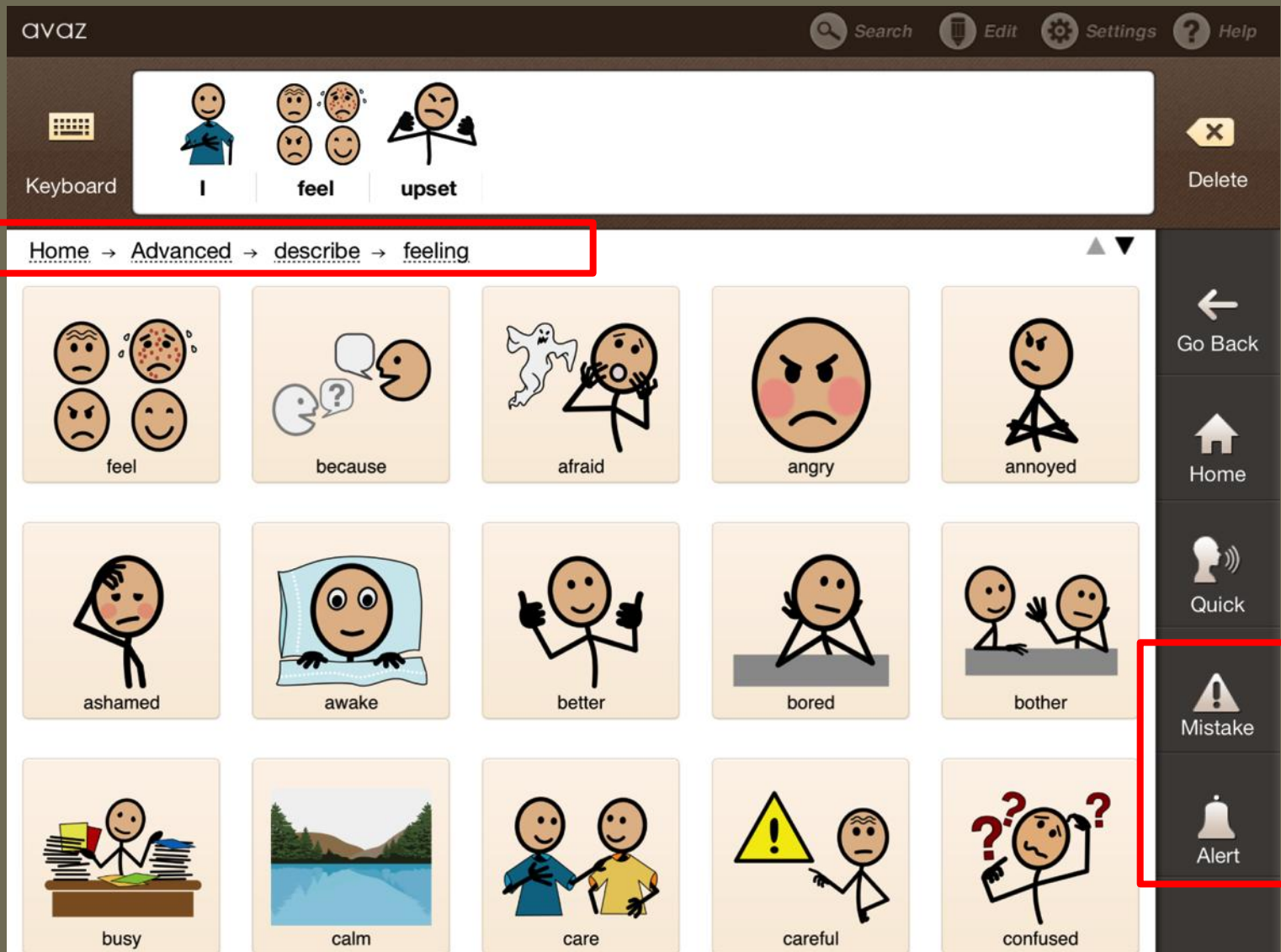


Se fai pronunciare una frase sbagliata, premi il pulsante “Errore” ed esegui la correzione. Premi il pulsante “Allarme” per richiamare l’attenzione. L’apposita barra mostra il percorso della schermata corrente.

Pulsanti della riga superiore

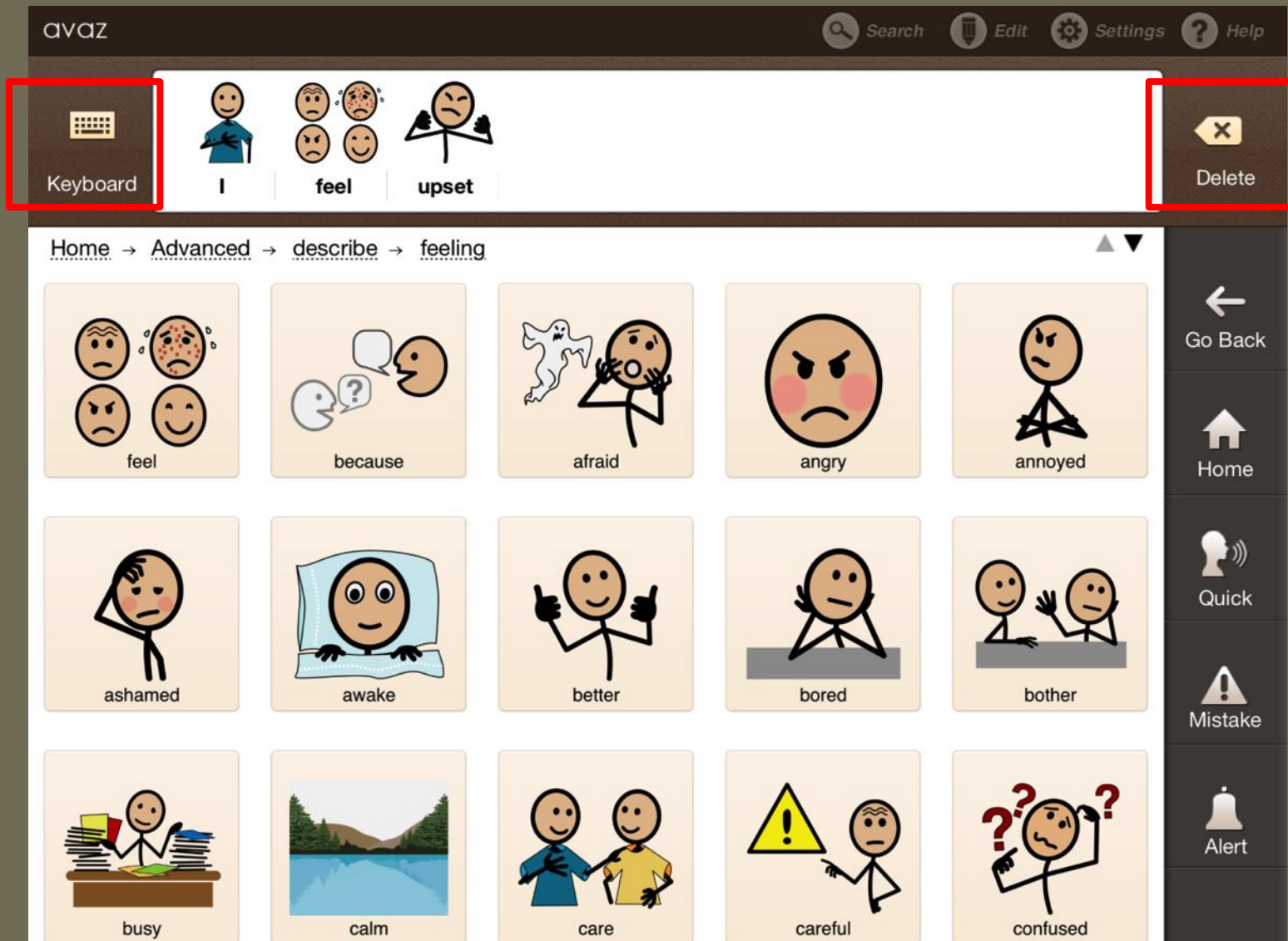

Seleziona il pulsante “Cancella” una volta per cancellare l’ultimo simbolo inserito nella cella messaggio, e due volte per cancellare tutto. Seleziona il pulsante “Tastiera” per passare alla modalità tastiera.

Aiuto contestuale

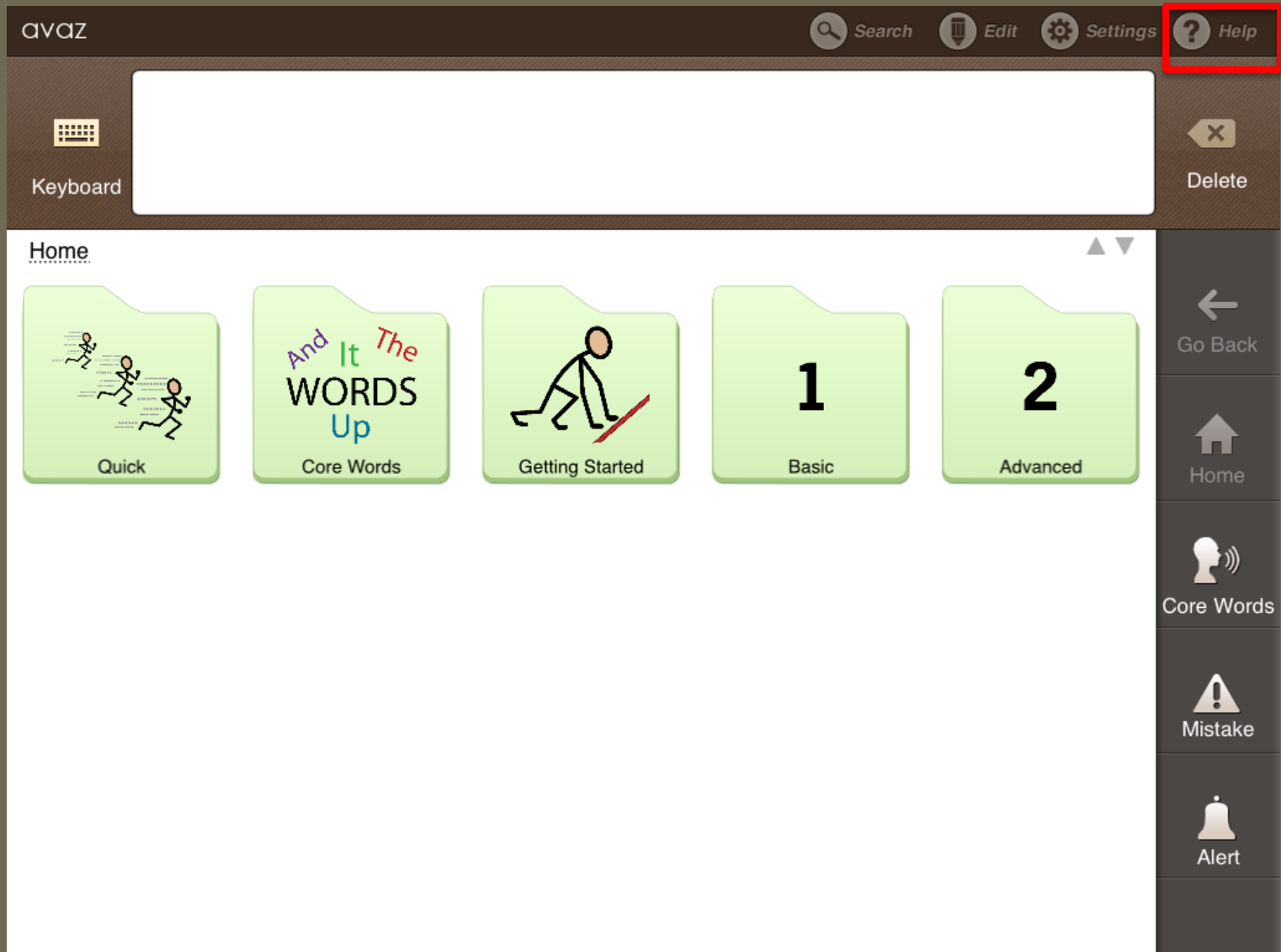

Premi il pulsante “Aiuto” nell’angolo in alto a destra per un aiuto contestuale. Questo pulsante è presente per ogni schermata di Avaz, con la spiegazione di ogni comando.

Ricerca vocabolario

The screenshot displays the AVAZ application interface. At the top, the AVAZ logo is on the left, and navigation icons for Search, Edit, Settings, and Help are on the right. The Search icon is highlighted with a red box. Below the top bar, there is a 'Keyboard' section and a 'Home' section with three folders: 'Quick', 'Core Words', and 'Getting'. A search modal is open, showing a search bar with the text 'color' and a list of search results. Each result includes an icon and a path to the word in the vocabulary.

AVAZ

Search Edit Settings Help

Keyboard

Home

Quick Core Words Getting

color

- Basic → indoor → color
- Basic → get dressed → color
- Advanced → describe → colors → color
- Advanced → categories → colors → color
- Advanced → my scenes → get dressed → choose color → color
- Quick → about me → my favorite color is
- Advanced → leisure-indoor → play board games → what color game...
- Advanced → leisure-indoor → do art and craft → color pencils
- Advanced → chat → about me → my favorite color is
- Advanced → categories → colors → favorite color
- Advanced → categories → stationery → color pencils
- Advanced → my scenes → at home → do homework → color pencils
- Advanced → my scenes → get dressed → choose color
- Advanced → my scenes → get dressed → choose color → favorite color

Premi il pulsante “Cerca” per trovare qualsiasi parola nel vocabolario, ed accedi alla pagina con un solo tocco.



Avaz

Modalità Tastiera

Avaz – Modalità tastiera




Questa è la modalità tastiera di Avaz. Utilizza la tastiera QWERTY per digitare ciò che vuoi dire. Questo layout è comodo per chi è esperto nell'uso di computer e tastiera.

Pulsanti




Premi il pulsante “Immagini” per passare alla modalità iconica. Premi la cella messaggio per far pronunciare il contenuto. Premi una sola volta il pulsante “Cancella” per cancellare l’ultima parola, premi due volte per cancellare l’intero messaggio.

Barra messaggi veloci

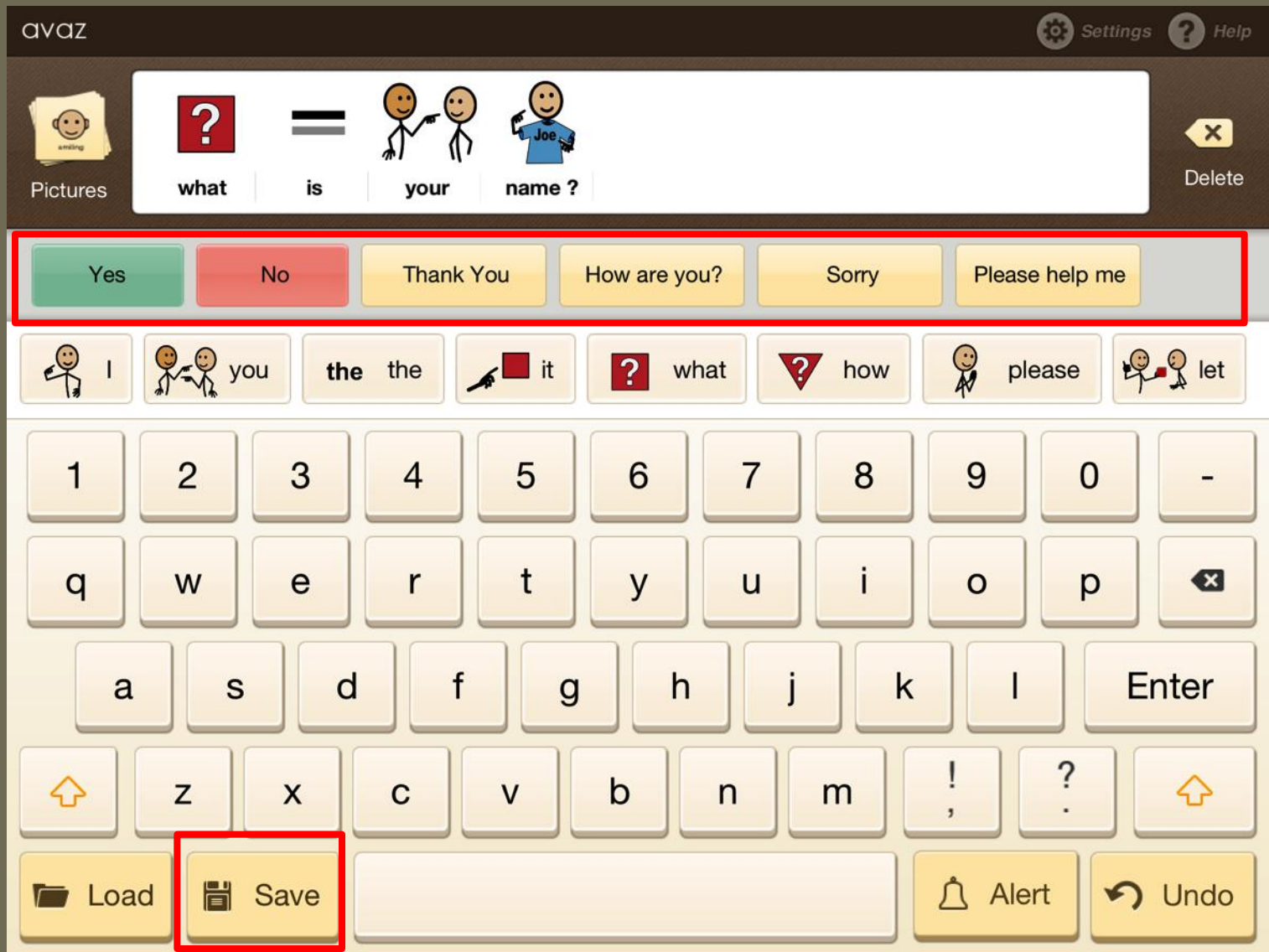


Non è necessario digitare ogni volta le parole più frequenti e le frasi comuni per conversare: puoi selezionarle direttamente dalla Barra messaggi veloci, che è completamente personalizzabile utilizzando il comando "Salva".

Predizione

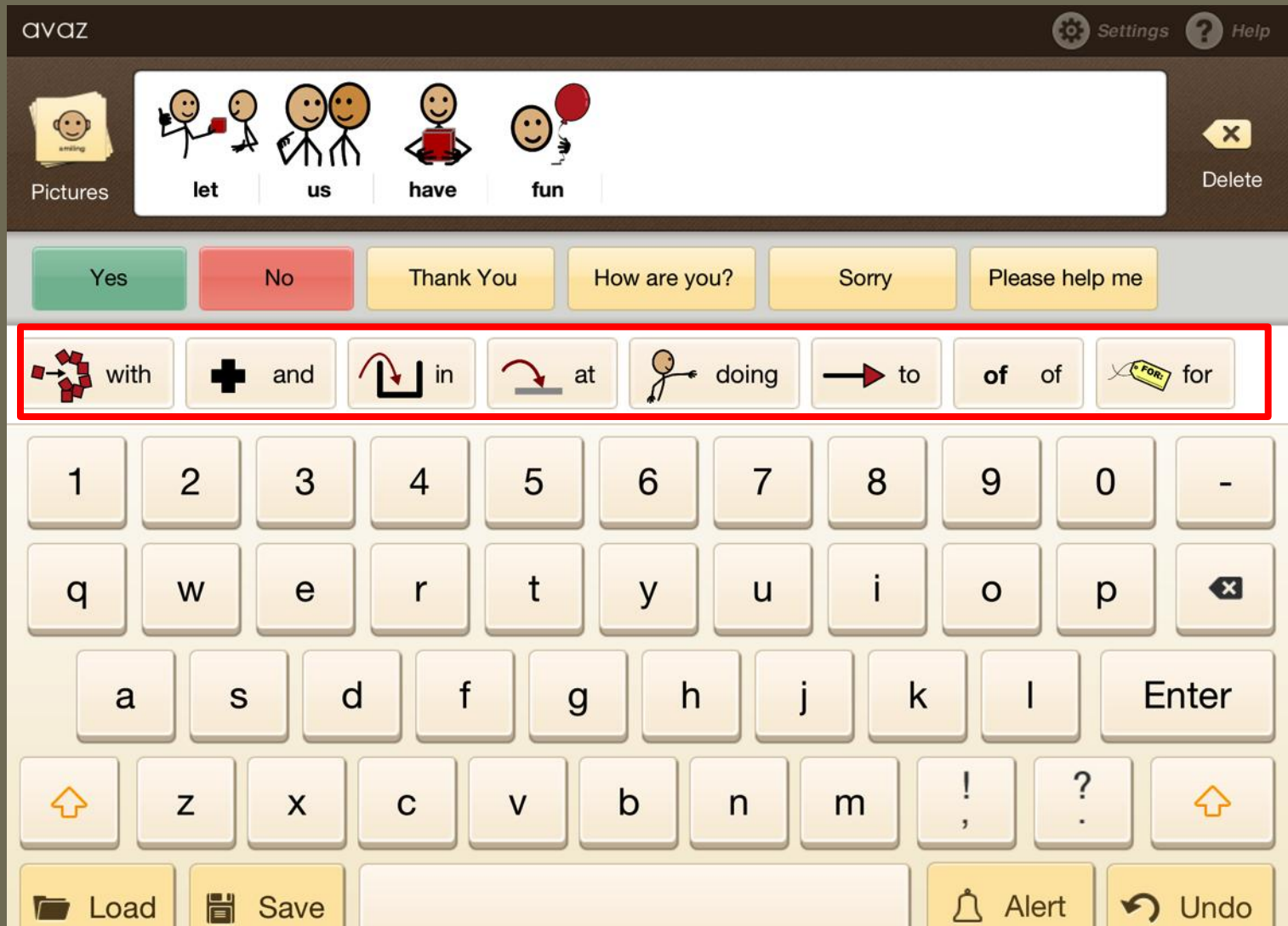

Digitare richiede tempo – la previsione consente di risparmiare tempo per la composizione della frase. Avaz può predire la parola che stai cercando di comporre, basandosi sulle parole che hai utilizzato finora. Puoi scegliere di utilizzare i simboli con la predizione.

Allarme e Annulla

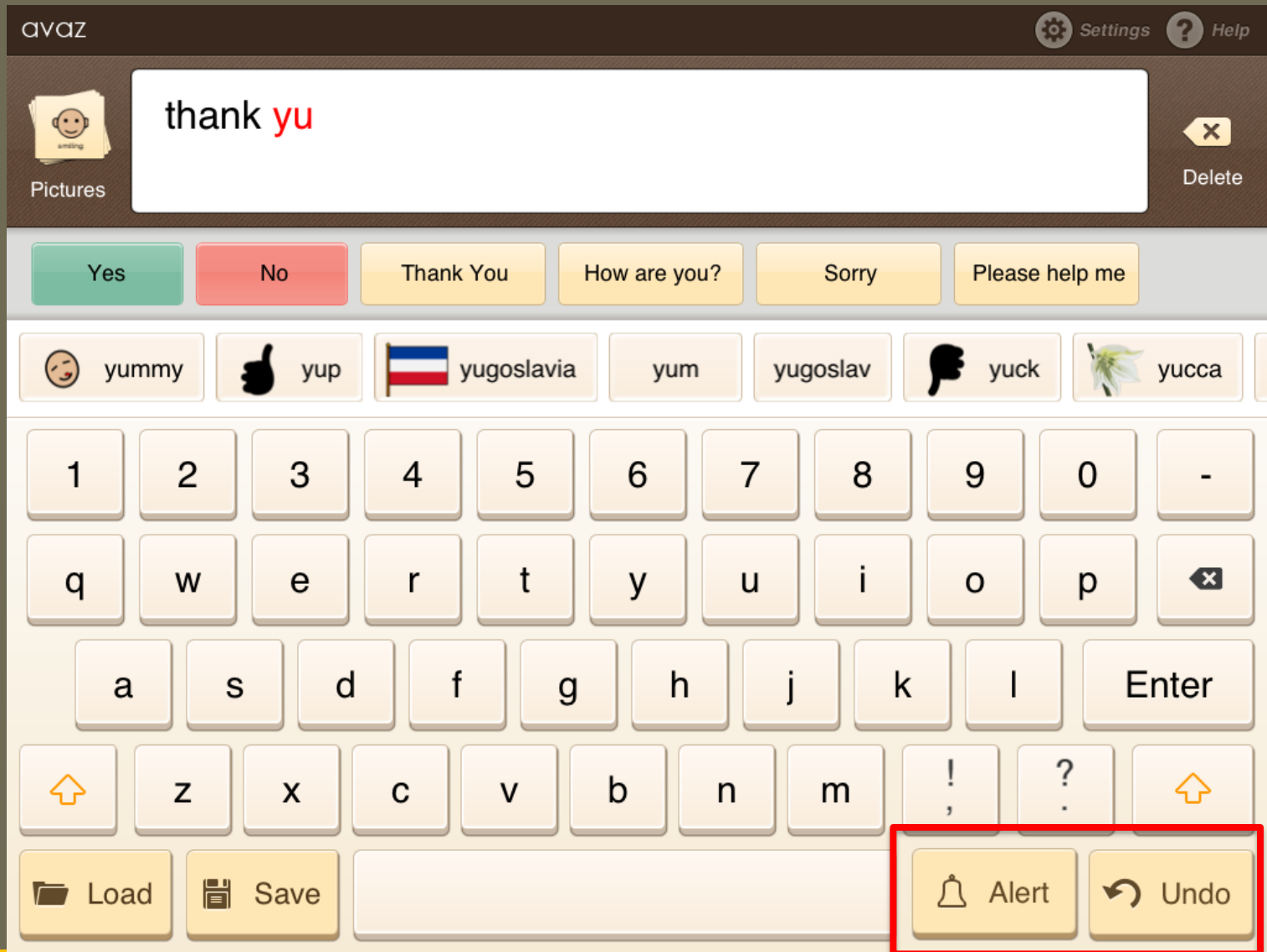

Il pulsante “Allarme” attiva il suono di una campana. Utilizzalo per richiamare l’attenzione. Premi il pulsante “Annulla” per cancellare l’ultimo elemento inserito nella cella messaggio.

Salva



Puoi utilizzare le funzioni “Salva” e “Carica” per creare scorciatoie per i messaggi utilizzati più frequentemente. Seleziona “Salva” e poi premi un tasto qualsiasi per memorizzare la frase in abbinamento a quel tasto della tastiera. I tasti già associati a combinazioni salvate sono evidenziati in rosso.

Carica

The screenshot shows the avaz app interface. At the top, there's a header with the 'avaz' logo, 'Settings', and 'Help' icons. Below the header is a message construction area with a 'Pictures' icon and a 'Delete' button. The message area contains the text 'good morning to you' with corresponding icons: a stick figure pointing up for 'good', a sun for 'morning', an arrow for 'to', and two stick figures for 'you'. Below the message area is a row of buttons: 'Yes', 'No', 'Thank You', 'How are you?', 'Sorry', and 'Please help me'. Underneath that is a row of message suggestions: 'good morning to you', 'you have any idea how to get there', 'please come in', and 'I think the people of ame'. The main part of the screen is a keyboard with several keys highlighted in red: '7', 'w', 'x', and the 'Load' button at the bottom left. The 'Load' button is a red folder icon with the text 'Load' next to it.

Puoi utilizzare il pulsante “Carica” per inserire messaggi associati ai tasti nella cella messaggio. Premi il pulsante “Carica” ed il tasto associato al messaggio per recuperare il messaggio salvato.

Frase precedenti

The screenshot shows the avaz app interface. At the top, there's a navigation bar with 'avaz', 'Settings', and 'Help'. Below it, a 'Pictures' section shows icons for 'good', 'morning', 'to', and 'you'. A central prediction bar is highlighted with a red border, containing the following phrases: 'good morning to you', 'you have any idea how to get there', 'please come in', and 'I think the people of ame'. Below the prediction bar is a virtual keyboard with several keys highlighted in red: '7', 'w', and 'x'. At the bottom, there are buttons for 'Load', 'Save', 'Alert', and 'Undo'.

Puoi caricare messaggi composti in precedenza selezionando il messaggio dalla barra predizione in modalità “Carica”.



Avaz: Personalizzazioni

Personalizza Avaz

avaz Search **Edit** Settings Help

Add new Change

Home → Advanced → people

I call don't is like with

name what where who who is that? my family

my pets school people more people helpers pronouns professions

describe nice to me not nice to me characters someone else

Go Back Copy Delete Enable Disable

Tocca l'icona della matita per entrare nella modalità "Modifica". L'icona diventa rossa quando la modalità "Modifica" è attivata. Tocca di nuovo l'icona per uscire.

Azioni in modalità "Modifica"

avaz Search Edit Settings Help

Add new Change

Home → Advanced → people

I call don't is like with

name what where who who is that? my family

my pets school people more people helpers pronouns professions

Go Back Copy Delete Enable Disable

Puoi copiare e incollare, cancellare, abilitare e disabilitare messaggi e categorie. Un elemento disabilitato non è visibile agli utilizzatori, senza bisogno di cancellarlo. Seleziona prima una azione, e poi una immagine per applicare l'azione selezionata.

Riorganizza elementi

The screenshot shows the AVAZ application interface. At the top, there is a navigation bar with the AVAZ logo, a search icon, and buttons for 'Search', 'Edit', 'Settings', and 'Help'. Below the navigation bar is a large white text input field with a plus icon on the left labeled 'Add new' and a change icon on the right labeled 'Change'. The main content area displays a breadcrumb trail: 'Home → Advanced → people → my family'. Below the trail is a grid of 24 icons representing various family and social relationships, each with a label: 'my', 'family', 'mom', 'dad', 'brother', 'sister', 'uncle', 'aunt', 'babysitter', 'caregiver', 'cousin', 'grandfather', 'grandmother', 'grandchild', 'grandparents', 'neighbor', 'younger', 'older', 'pet', 'is home', and 'is at work'. A 'your' icon is also visible, overlapping the 'uncle' and 'aunt' icons. On the right side, there is a vertical sidebar with five action buttons: 'Go Back', 'Copy', 'Delete', 'Enable', and 'Disable'.

Per riorganizzare le immagini in modalità “Modifica”, puoi trascinare e rilasciare le immagini in una diversa collocazione. Inizia il trascinamento mantenendo premuto un elemento per un paio di secondi.

Aggiungi messaggi/categorie

The screenshot shows the avaz application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'avaz' on the left and icons for 'Search', 'Edit', 'Settings', and 'Help' on the right. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Add new' (with a plus sign icon) on the left and 'Change' (with a document icon) on the right, both highlighted with red boxes. The main content area displays a grid of icons representing various categories and messages. A modal dialog is open in the center, asking 'What do you want to create?' with two options: 'New message' and 'New category'. The grid includes icons for 'I', 'call', 'like', 'with', 'name', 'what', 'where', 'who', 'who is that?', 'my family', 'my pets', 'school people', 'more people', 'helpers', 'pronouns', 'professions', 'describe', 'nice to me', 'not nice to me', 'characters', and 'someone else'. On the right side, there is a vertical sidebar with buttons for 'Go Back', 'Copy', 'Delete', 'Enable', and 'Disable'.

Premi il pulsante “Aggiungi nuovo” per aggiungere un nuovo messaggio o una nuova categoria. Per modificare un elemento esistente, seleziona il pulsante “Cambia” e poi il messaggio o la categoria da modificare.

Aggiungi/modifica elemento: etichetta e immagine

The screenshot shows the avaz app interface with a dialog box for editing a symbol. The dialog box has a title bar with 'Cancel' and 'Done' buttons. The main content area shows a preview of a family icon with the caption 'my family'. Below the preview are several options for customizing the symbol:

- Caption:** A text field containing 'my family'.
- Show in message box:** A toggle switch currently set to 'OFF'.
- Color:** A palette of colored circles (orange, green, purple, yellow, blue, grey, brown) with a close button (X).
- Find symbol:** A search bar.
- Take Photo / Choose Photo:** Two buttons for selecting an image.
- Speak as:** A text field with a speaker icon, a red circle icon, and a trash icon.

Imposta l'etichetta verbale, l'immagine e l'audio dell'elemento. Cambia la codifica colore di ogni parola scegliendolo dalla paletta "Colore".

Modifica elemento: audio

AVAZ Search Edit Settings Help

Cancel Done

people_symbolstix/family/family_2.png

my family

my family

Show in message box OFF

Color

Find symbol

Take Photo Choose Photo

Speak as

Change

Go Back

Copy


Delete

Enable

Disable


Utilizza il campo “Verbalizza” per personalizzare il modo in cui il contenuto viene verbalizzato. Puoi anche registrare la tua voce.

Cerca simbolo

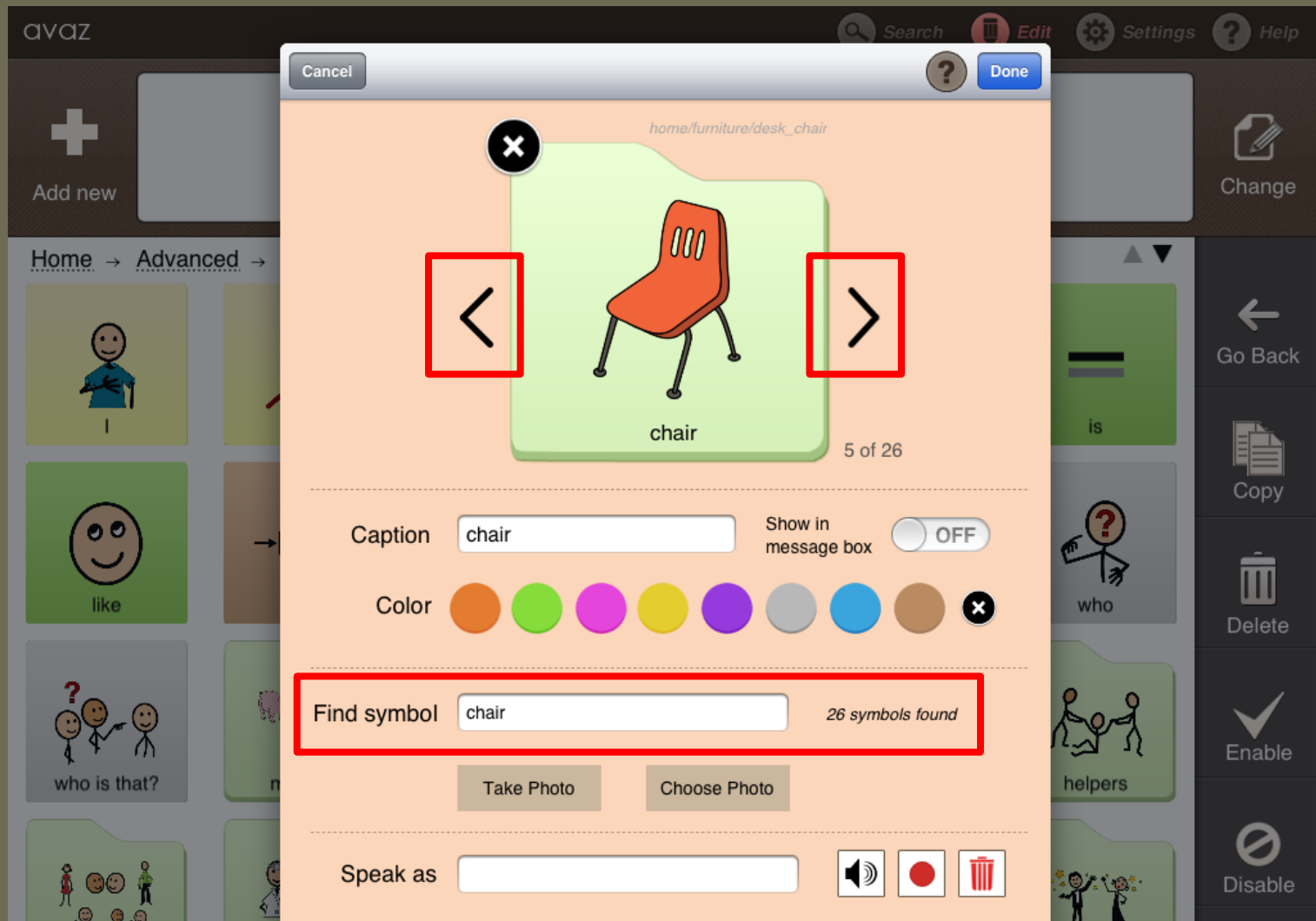


Naviga tra gli oltre 15.000 simboli specificando quale parola stai cercando nel campo "Trova simbolo". Usa la freccia a destra e la freccia a sinistra ai lati dell'immagine per scorrere attraverso i risultati della ricerca e trovare l'immagine più appropriata.

Fotografare

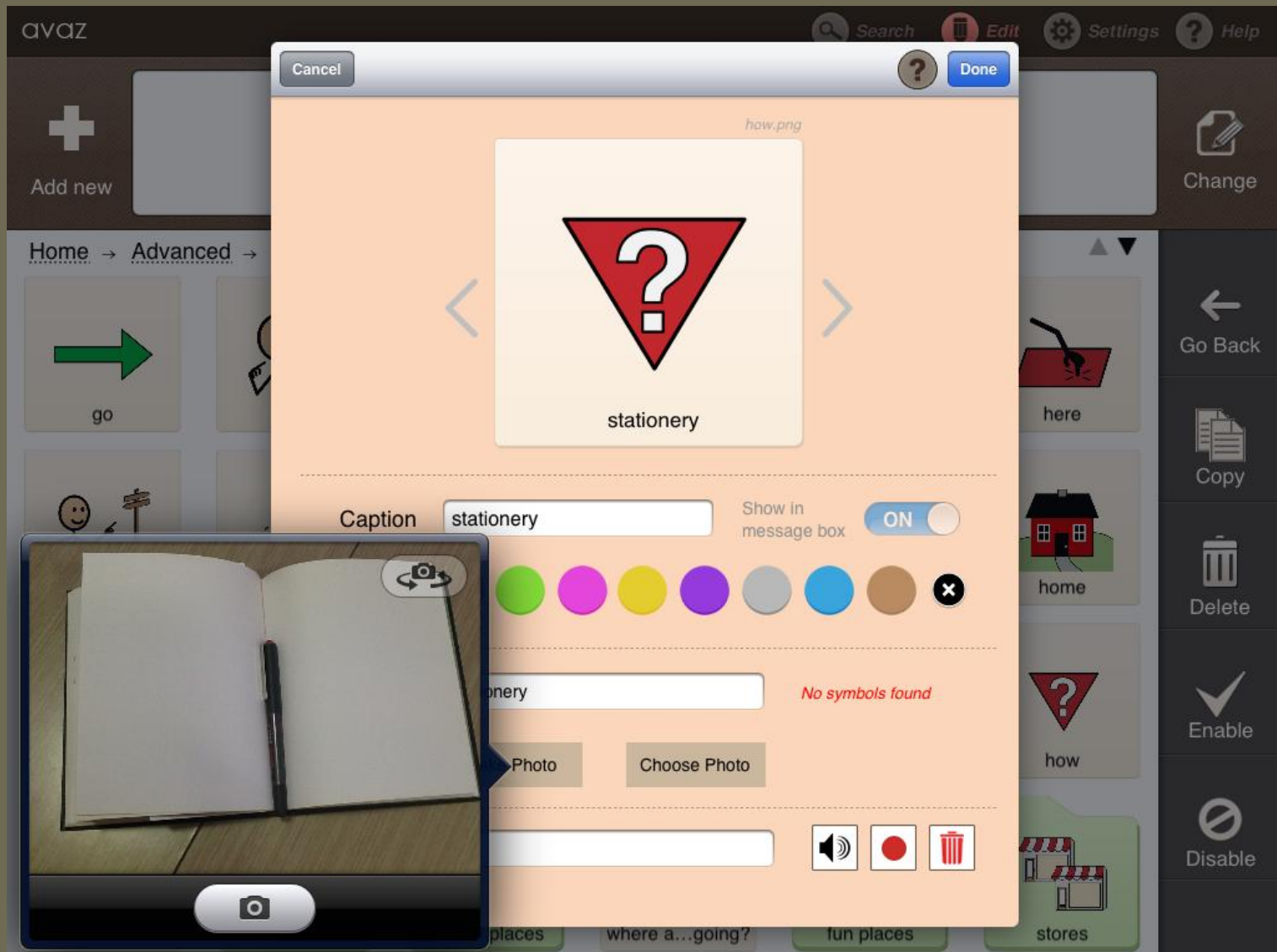

Seleziona il pulsante foto per scattare una fotografia di quello che desideri aggiungere o modificare.

Seleziona foto

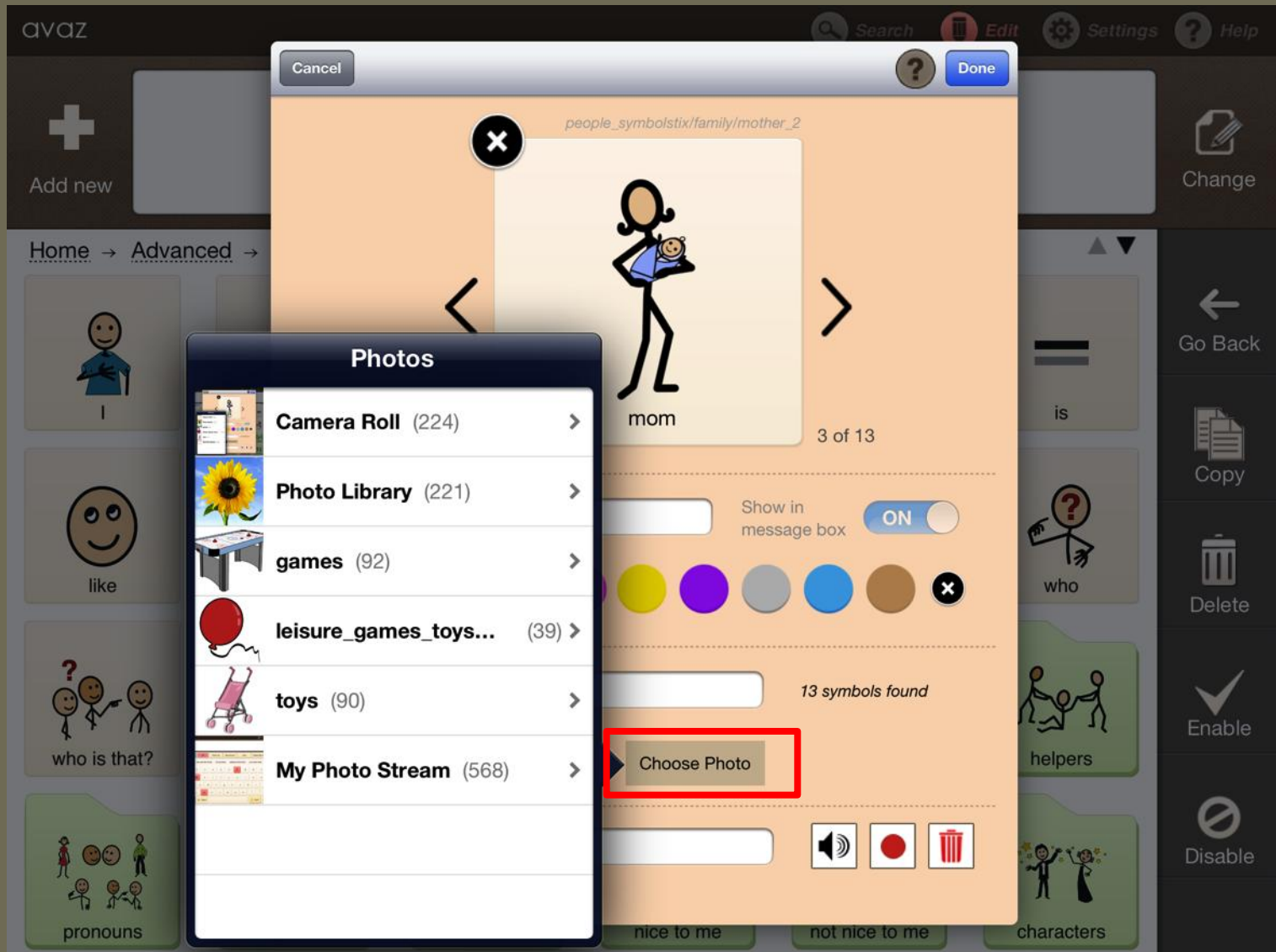

Seleziona il pulsante “Seleziona foto” per scegliere una fotografia da una raccolta o dalla galleria immagini del tuo dispositivo.



Avaz: Impostazioni

Avaz - Impostazioni

The screenshot shows the Avaz application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'avaz' logo on the left and icons for Search, Edit, Settings, and Help on the right. Below the navigation bar, there is a 'Keyboard' section with a keyboard icon. The main content area is titled 'Home' and features four green folder-like icons: 'Quick' (with a stick figure running), 'Core Words' (with the text 'And It The WORDS Up'), 'Getting Started' (with a stick figure pushing a red bar), and 'Basic' (with the number '1'). A settings menu is overlaid on the right side of the screen. The menu is titled 'General' and has two tabs: 'Keyboard' and 'Pictures'. The 'Pictures' tab is selected. The settings menu includes the following options:

- Start with: Keyboard (selected), Pictures
- Share on social media >
- Backup & Restore >
- Track session: Start (selected), Stop
- Get Avaz tips & more >
- Picture settings (Appearance)
 - Message box: ON (selected)
 - Pictures in msg box: ON (selected)
 - Pictures per screen >
 - Caption size >
 - High contrast: OFF
 - Color coding >
- Picture settings (Behavior)
 - Zoom on select >


Utilizza il menu “Impostazioni” per adattare Avaz alle tue necessità.

Condividi da Avaz

The screenshot displays the Avaz application interface. At the top, the word "avaz" is on the left, and navigation icons for "Search", "Edit", "Settings", and "Help" are on the right. Below this is a horizontal menu with icons for "Keyboard", a person, a smiley face, an arrow, a hand holding a red card, a tablet, and a Facebook icon. The text "I like to use Avaz" is positioned below these icons. The Facebook icon is highlighted with a red square. To the right of the Facebook icon is a "Delete" button with an 'X' icon. Below the menu is a "Home" section with five green folder-like icons: "Quick" (with a running stick figure), "Core Words" (with the text "And It The WORDS Up"), "Getting Started" (with a stick figure on a ramp), "Basic" (with the number "1"), and "Advanced" (with the number "2"). On the right side of the screen is a vertical sidebar with icons for "Go Back", "Home", "Quick", "Mistake", and "Alert".


Utilizza l'opzione "Condividi sui social media" per condividere messaggi attraverso i social media via email, Facebook e Twitter.

Backup e Ripristino dei dati

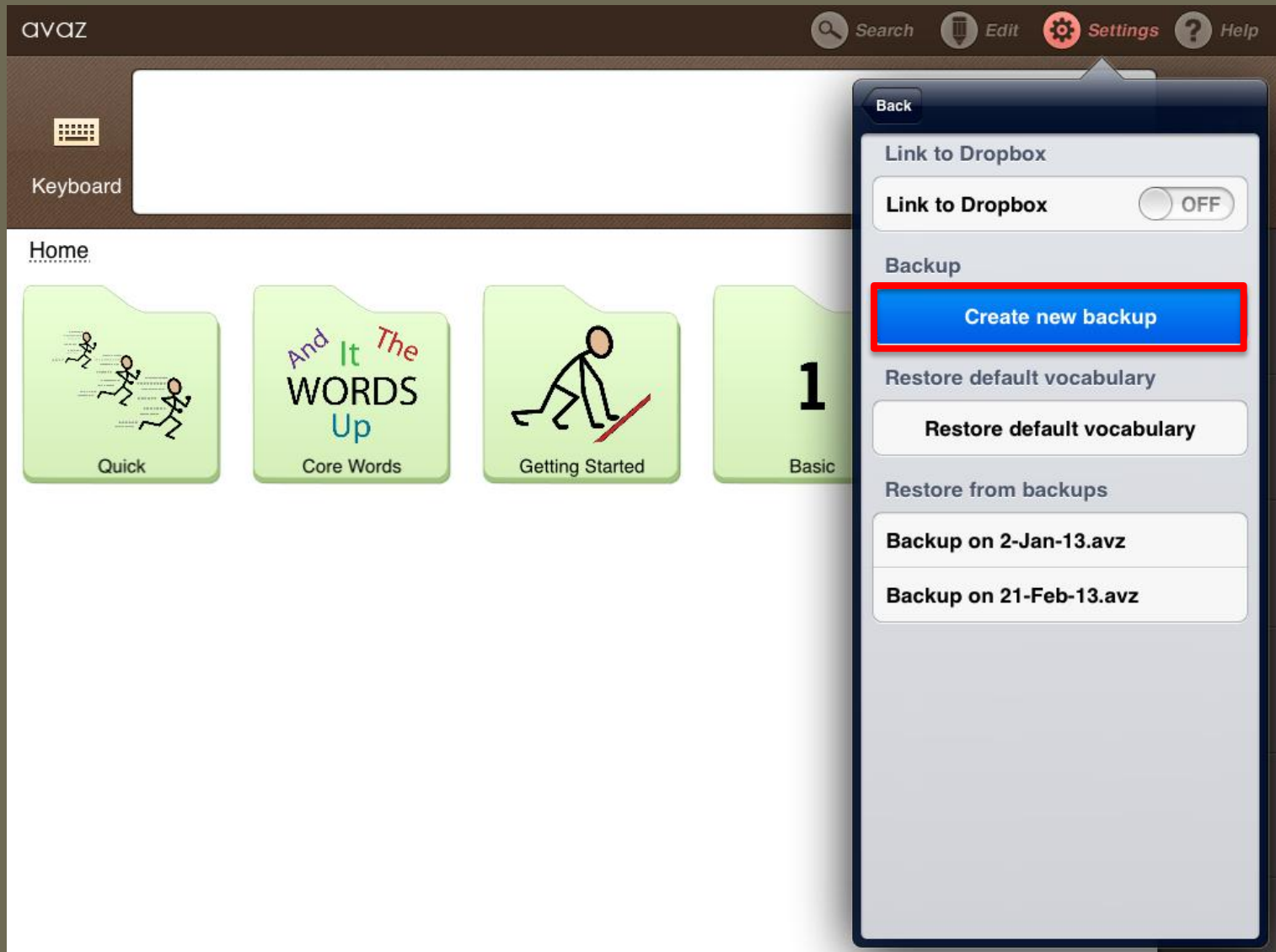


Utilizza l'opzione "Backup & Ripristino" per creare salvataggi periodici dei tuoi dati Avaz. Puoi anche ripristinare i tuoi dati da salvataggi precedenti.

Accesso ai tuoi backup

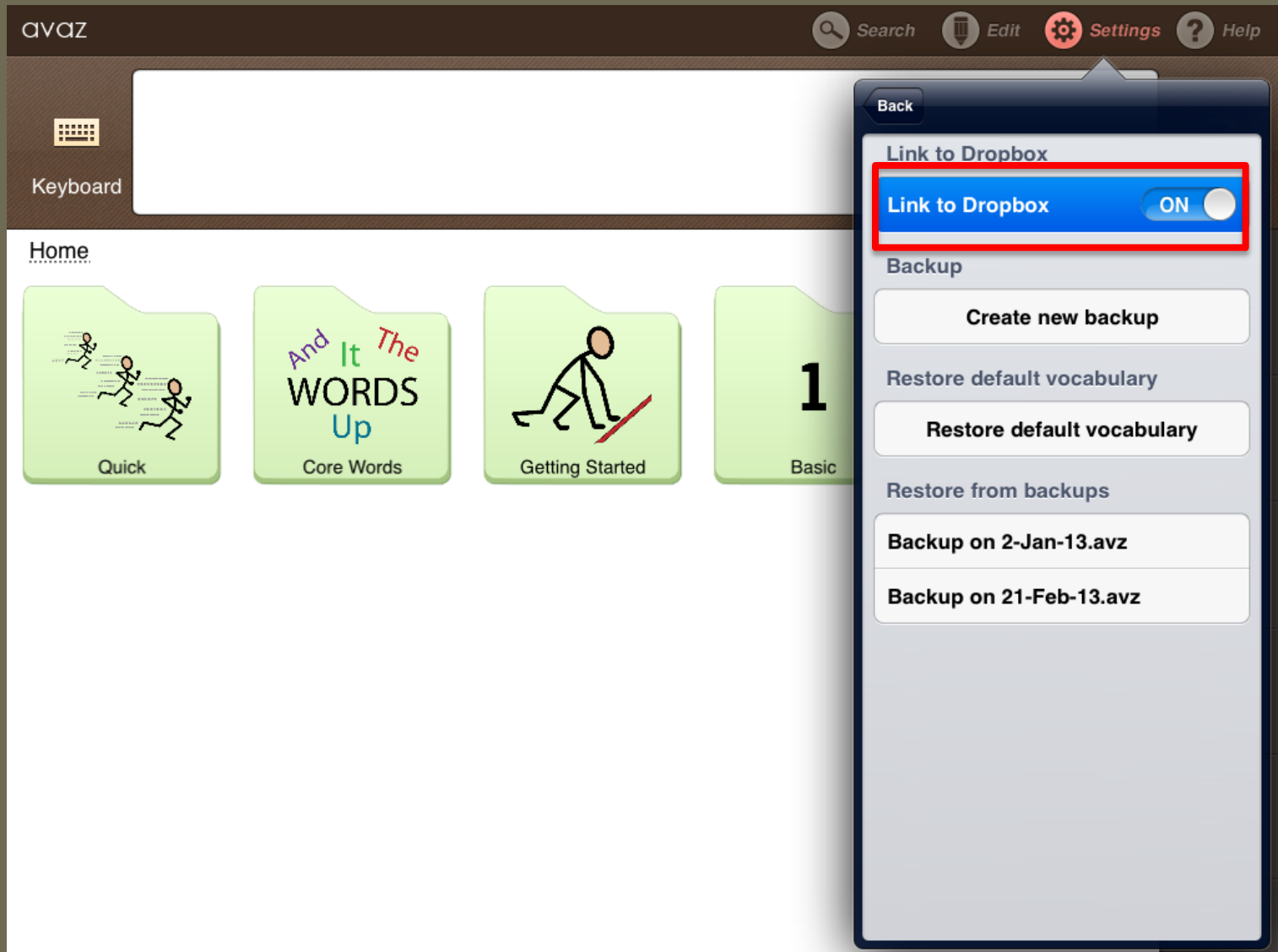


Puoi accedere ai tuoi backup anche attraverso iTunes. Puoi iscriverti a Dropobox per salvare in Dropobox i tuoi backup.

Sincronizza i contenuti Avaz

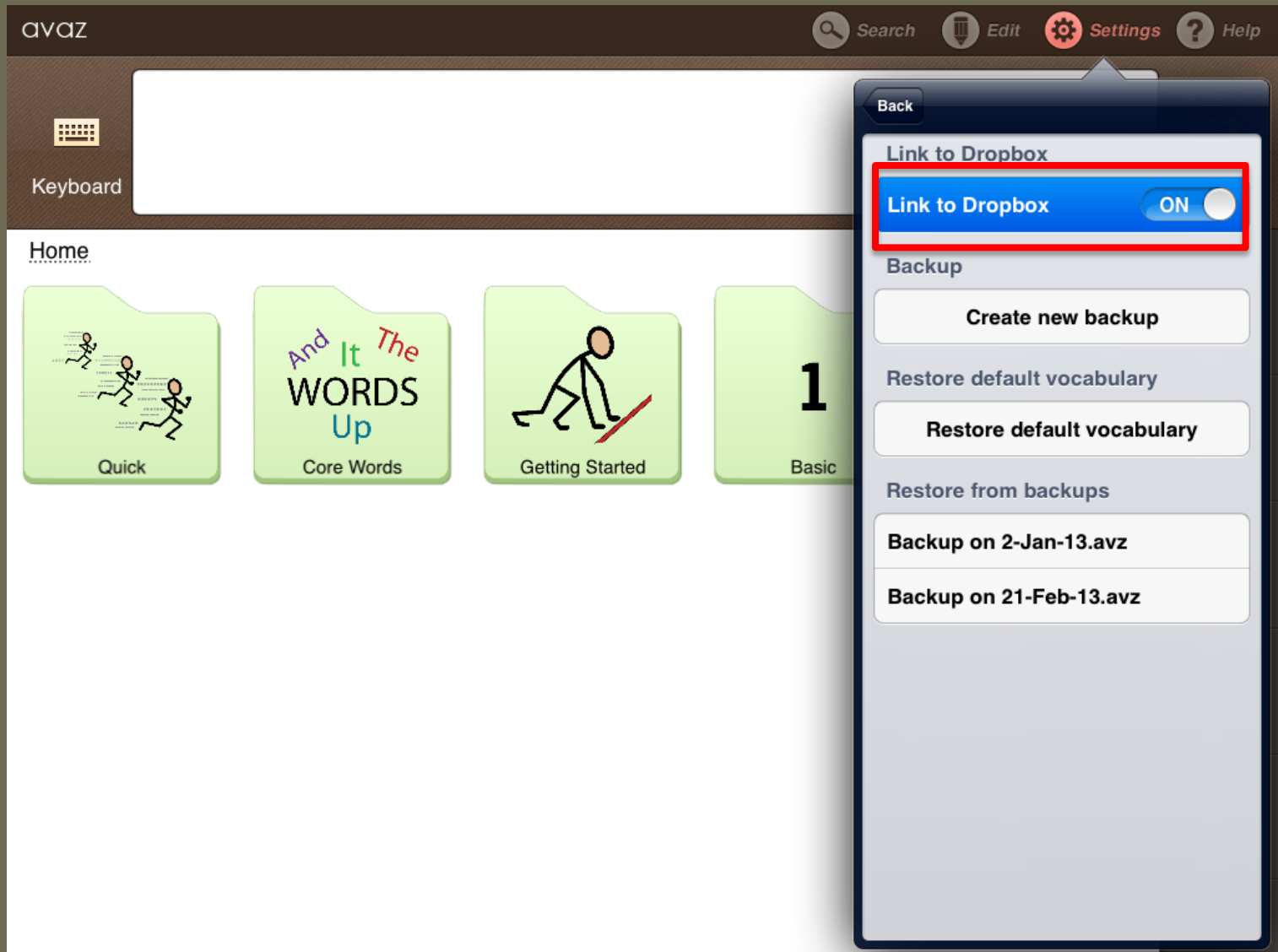


Utilizza Dropbox per sincronizzare il tuo Avaz su diversi dispositivi iPad.

Ripristina il vocabolario di base

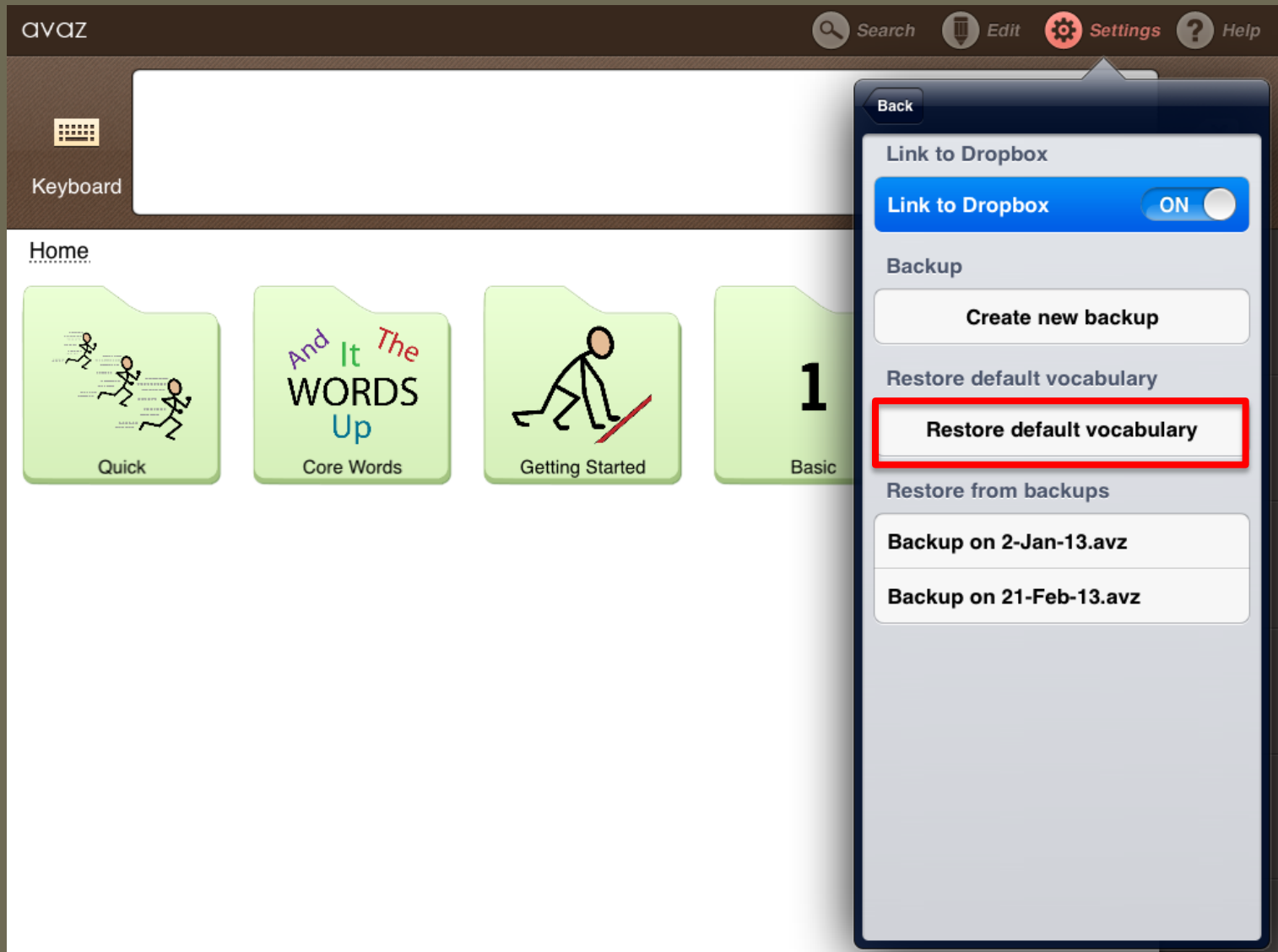

Puoi eliminare tutte le personalizzazioni e tornare al vocabolario di base.

Registra la tua sessione di terapia

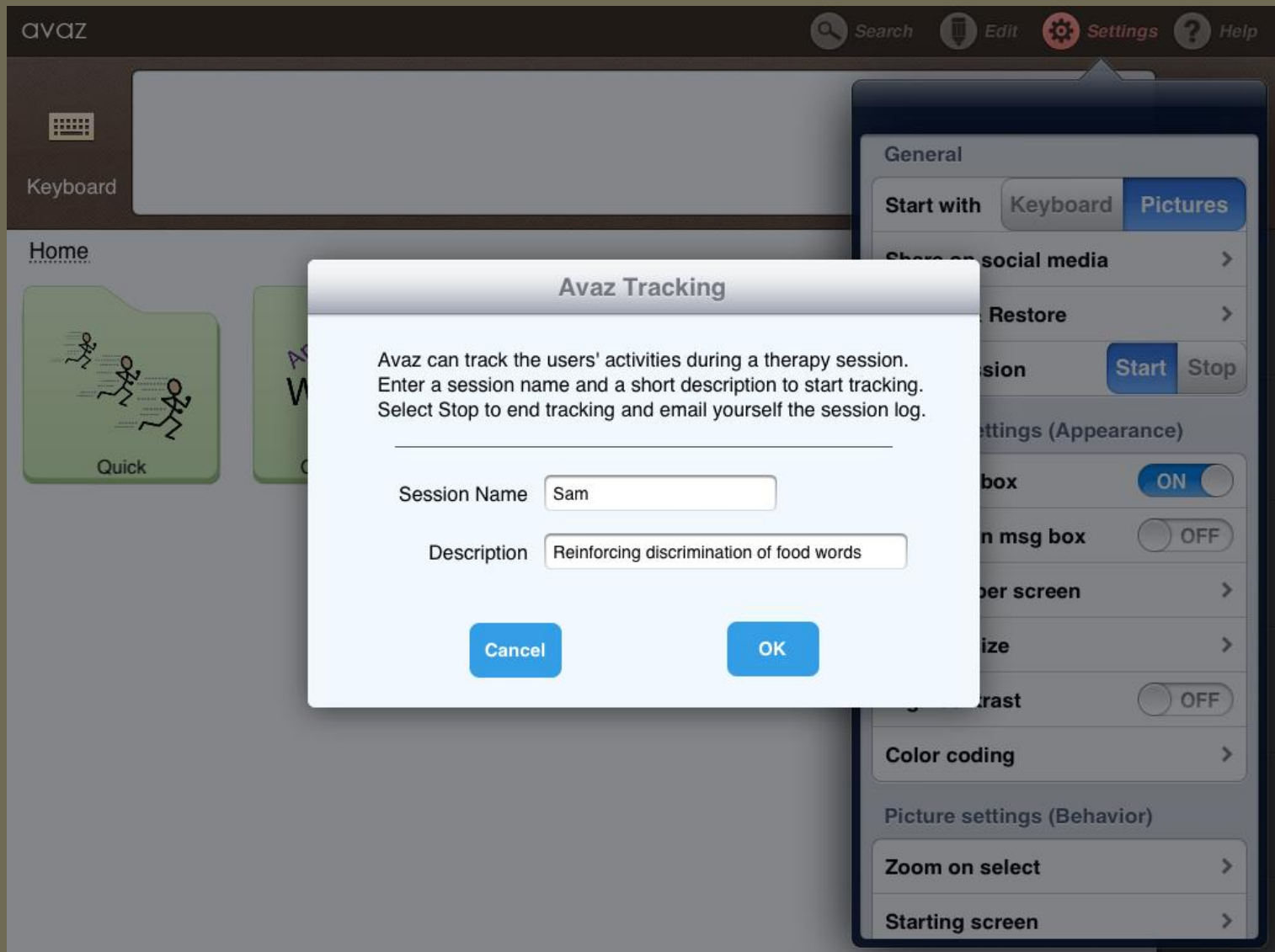

Utilizza “Registra sessione” per iniziare una registrazione automatica delle attività dell’utente durante una seduta di terapia.

Impostazioni modalità iconica





















The screenshot displays the avAZ application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'avAZ' logo on the left and icons for 'Search', 'Edit', 'Settings', and 'Help' on the right. Below the navigation bar, a 'Keyboard' section is visible. The main content area is titled 'Home' and features four large, light green buttons: 'Quick' (with an icon of three running stick figures), 'Core Words' (with the text 'And It The WORDS Up'), 'Getting Started' (with an icon of a stick figure on a red ramp), and 'Basic' (with a large number '1'). A settings menu is overlaid on the right side of the screen, outlined in red. This menu is divided into two sections: 'Picture settings (Appearance)' and 'Picture settings (Behavior)'. The 'Appearance' section includes options for 'Message box' (ON), 'Pictures in msg box' (OFF), 'Pictures per screen', 'Caption size', 'High contrast' (OFF), and 'Color coding'. The 'Behavior' section includes options for 'Zoom on select', 'Starting screen', 'Auto-home each time' (OFF), 'Rearrange on disable' (ON), 'Page up & down keys' (OFF), and 'Quick/Core Words button'.

Puoi personalizzare aspetto ed azioni nella modalità iconica cambiando le impostazioni per renderle più adatte a ciascun utilizzatore.

Modalità album

avaz Search Edit Settings Help

Home → Advanced → indoor → play with toys

 toy	 baby doll	 ball	 ball pit	 balloon
 barbie	 bat	 beads	 bean bag	 bounce on ball
 bubble wand	 bubbles	 bucket	 cars	 doll
 dollhouse	 jump rope	 Playmobil	 pull toy	 puppet

Keyboard
Go Back
Home
Quick
Mistake
Alert

Escludi la cella messaggio con la modalità album. Questo riduce le distrazioni sullo schermo ed è particolarmente adatta ai principianti.

Dimensioni immagine

avaz Search Edit Settings Help

Keyboard I want soup Delete

Home → Advanced → food → lunch and dinner ▲ ▼

salad

soup

Go Back Home Quick Mistake Alert

The screenshot shows the Avaz application interface. At the top, there is a dark header with the 'avaz' logo and navigation icons for Search, Edit, Settings, and Help. Below the header is a white input area containing three icons: a person, a person pointing at a red square, and a bowl of soup. Below these icons are the words 'I', 'want', and 'soup'. To the right of this area is a 'Delete' button. Below the input area is a breadcrumb trail: 'Home → Advanced → food → lunch and dinner'. The main content area displays two large, light-colored rectangular cards. The left card shows a bowl of salad with the word 'salad' below it. The right card shows a bowl of soup with the word 'soup' below it. On the right side of the screen, there is a vertical sidebar with several navigation buttons: 'Go Back' (left arrow), 'Home' (house icon), 'Quick' (person with sound waves), 'Mistake' (warning triangle), and 'Alert' (bell icon).


Puoi selezionare il numero delle immagini sullo schermo utilizzando le impostazioni “Immagini su schermo”. Le dimensioni delle immagini si riducono progressivamente man mano che ne aumenta il numero.

Dimensioni etichetta

The screenshot shows the Avaz application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'avaz' logo, a search icon, and buttons for 'Edit', 'Settings', and 'Help'. Below the navigation bar is a 'Keyboard' section with a keyboard icon. The main content area is titled 'Home → Advanced' and displays a grid of 16 word cards. Each card contains an icon and a word: 'I' (person), 'you' (two people), 'that' (hand pointing to a red square), 'do' (person with arm out), 'is' (equals sign), 'like' (smiley face), 'want' (person with hand over a red square), 'to' (arrow), 'not' (red X), 'what' (red square with question mark), 'food' (plate of food), and 'indoor' (people sitting at a table). A settings menu is open on the right side, titled 'Back', and lists five options: 'No caption (only image)', 'Small', 'Medium', 'Large' (which is selected with a blue checkmark), and 'Only text (no image)'.

Puoi utilizzare Avaz per favorire la lettura globale delle parole, diminuendo progressivamente le dimensioni dell'immagine in relazione alla sua etichetta verbale. Per farlo, utilizza nelle impostazioni la voce "Dimensioni etichetta".

Modalità ad alto contrasto

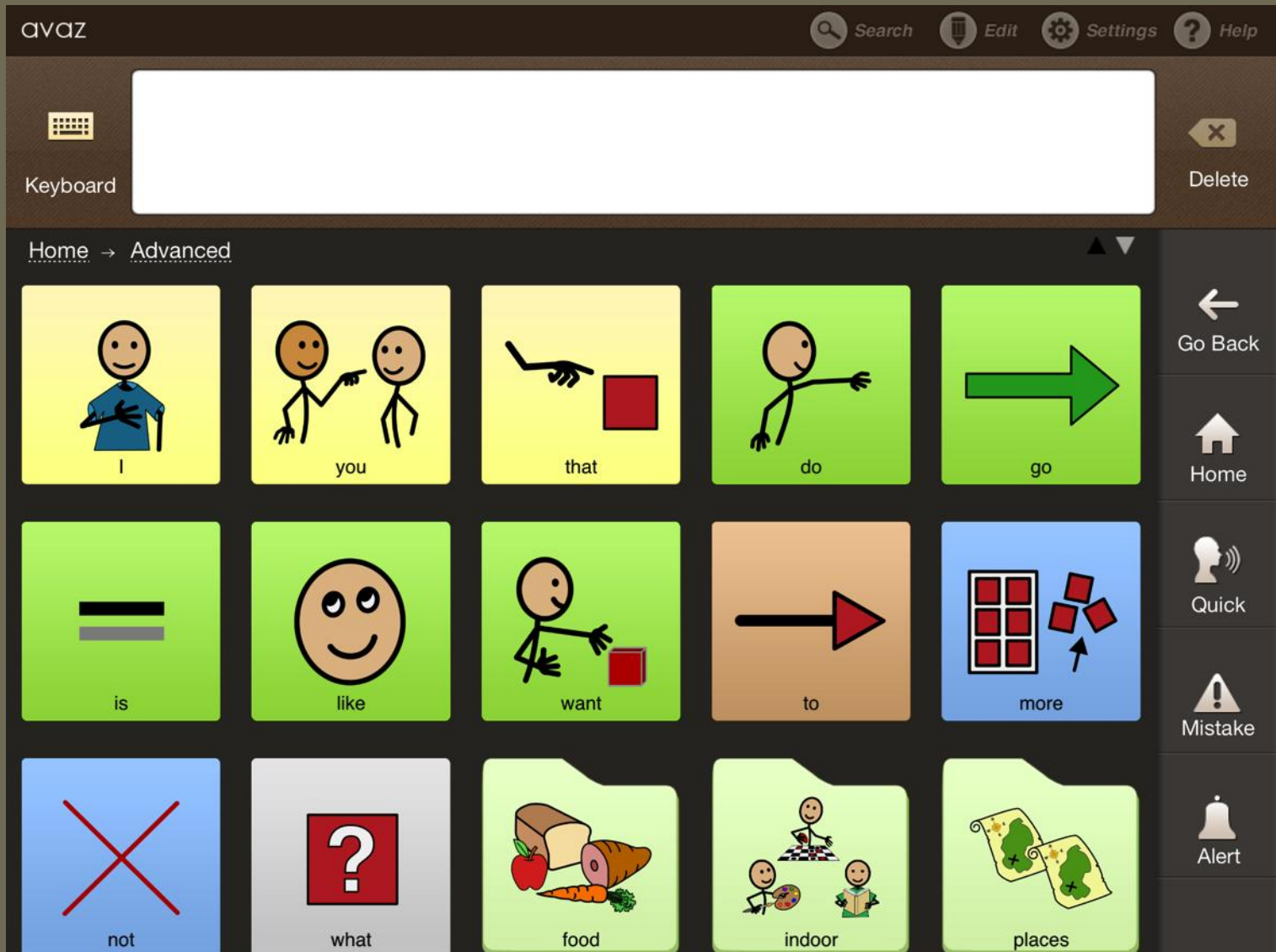


Puoi utilizzare la modalità ad alto contrasto per i bambini che preferiscono uno sfondo scuro.

Ingrandimento selezione

The screenshot displays the Avaz application interface. At the top, the 'avaz' logo is on the left, and navigation icons for 'Search', 'Edit', 'Settings', and 'Help' are on the right. Below this is a 'Keyboard' section with icons for 'play' (two stick figures) and 'drums' (a red drum). A 'Delete' button with an 'X' icon is on the right. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Home -> Advanced -> indoor -> listen to music'. A grid of icons represents various musical instruments: 'band', 'drums' (enlarged), 'clarinet', 'cymbal', 'flute', and 'guitar'. Other visible icons include an electric guitar, harmonica, keyboard, maracas, and piano. On the right side, a vertical navigation bar contains icons for 'Go Back', 'Home', 'Quick', 'Mistake', and 'Alert'.

Avaz prevede diverse facilitazioni in caso di difficoltà sensoriali, come l'ingrandimento della selezione ed il prompt acustico (etichetta audio). Imposta l'opzione "Zoom sulla selezione" per avere un ingrandimento dell'immagine selezionata. La velocità dello zoom può essere variata.

Pagina iniziale

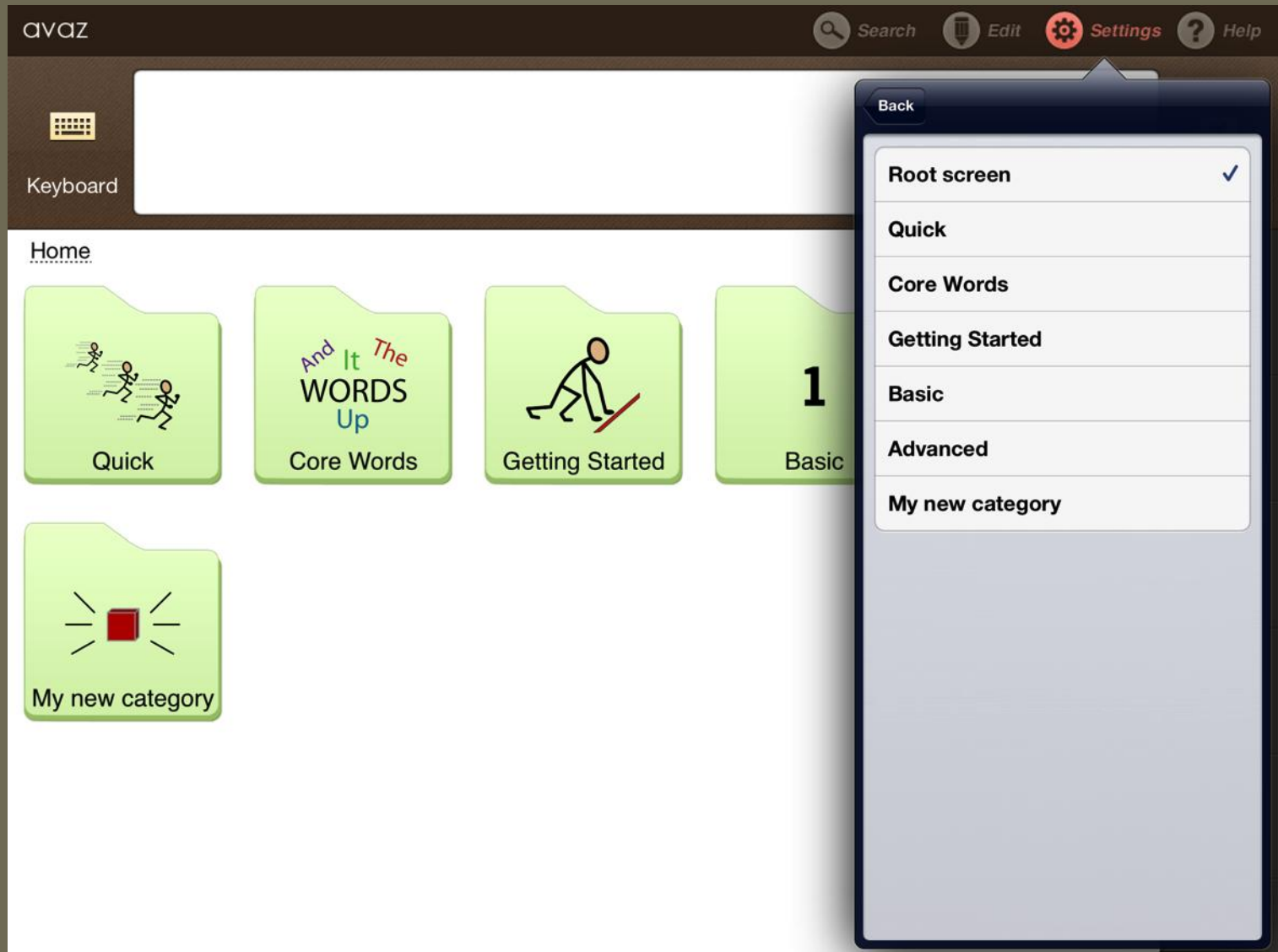


Seleziona qualsiasi categoria nella videata iniziale di Avaz come pagina iniziale in modalità iconica. Utilizza le impostazioni di “Pagina iniziale”

Impostazioni modalità tastiera

The screenshot displays the Avaz application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Avaz' logo, a search icon, and buttons for 'Edit', 'Settings', and 'Help'. Below the navigation bar, a 'Keyboard' section is visible. The main content area is titled 'Home' and features four green folder-style icons: 'Quick' (with a stick figure), 'Core Words' (with the text 'And It The WORDS Up'), 'Getting Started' (with a stick figure on a ramp), and 'Basic' (with the number '1'). A settings menu is open on the right side, with the 'Keyboard settings' section highlighted by a red box. This section includes a 'Layout' toggle set to 'QWE' (with 'ABC' also visible) and a 'Predict pictures' toggle set to 'ON'. Other settings sections visible include 'Audio settings' with 'Voice', 'Speed', 'Speak as you type', and 'Speak action keys' (all 'ON'), and buttons for 'Change settings password' and 'Avaz support'. At the bottom of the settings menu, it states 'You are running Avaz version 2.0'.


Puoi modificare le impostazioni specifiche della tastiera nell'ordine ABC (alfabetico) o QWE (Qwerty) tramite il menu "Impostazioni modalità tastiera"

Layout ABC

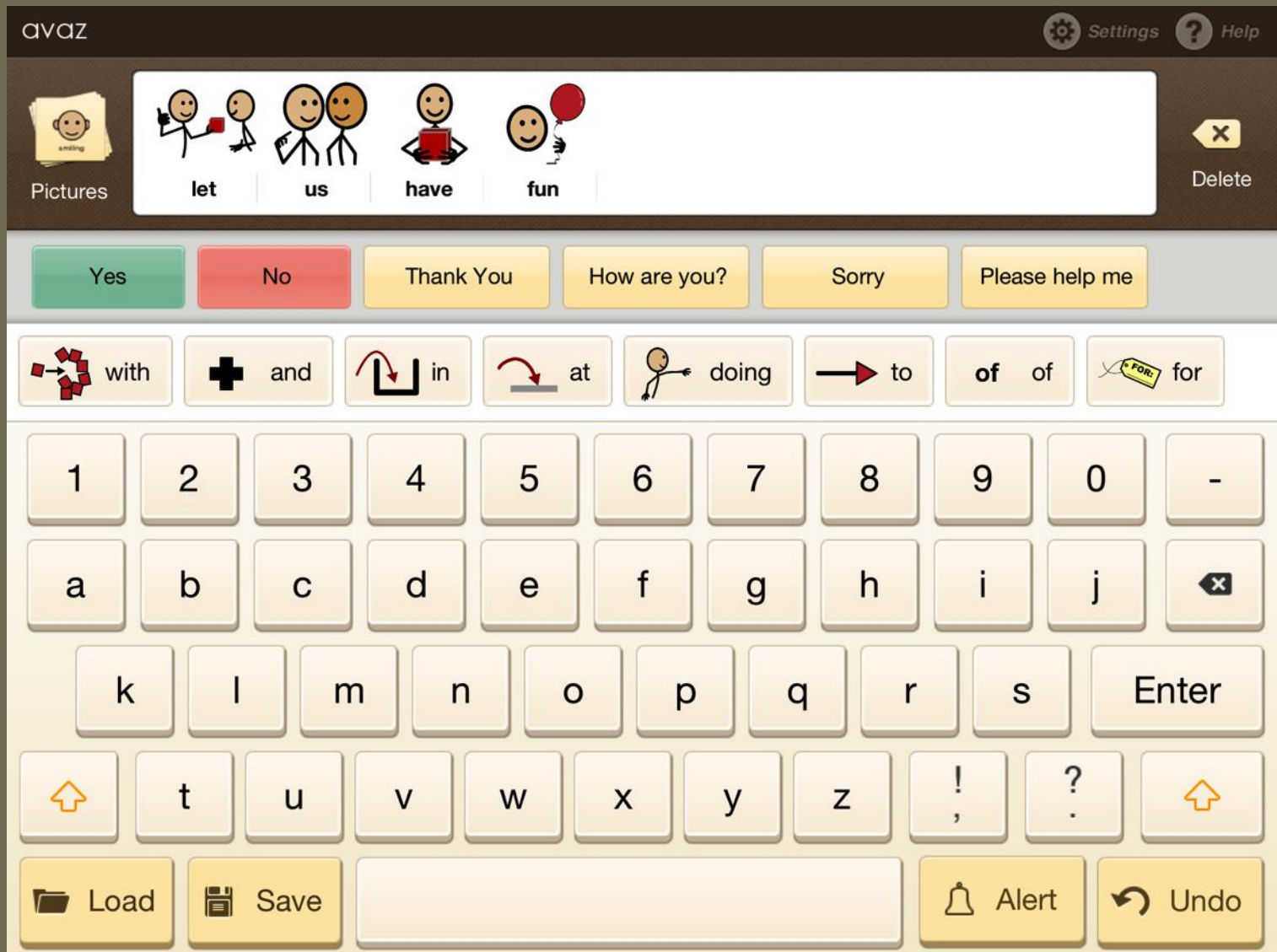

I bambini che si trovano in difficoltà nell'utilizzo della tastiera standard possono utilizzare un layout semplificato con le lettere in ordine alfabetico (ABC). Questo layout è utile anche per principianti.

Impostazioni audio

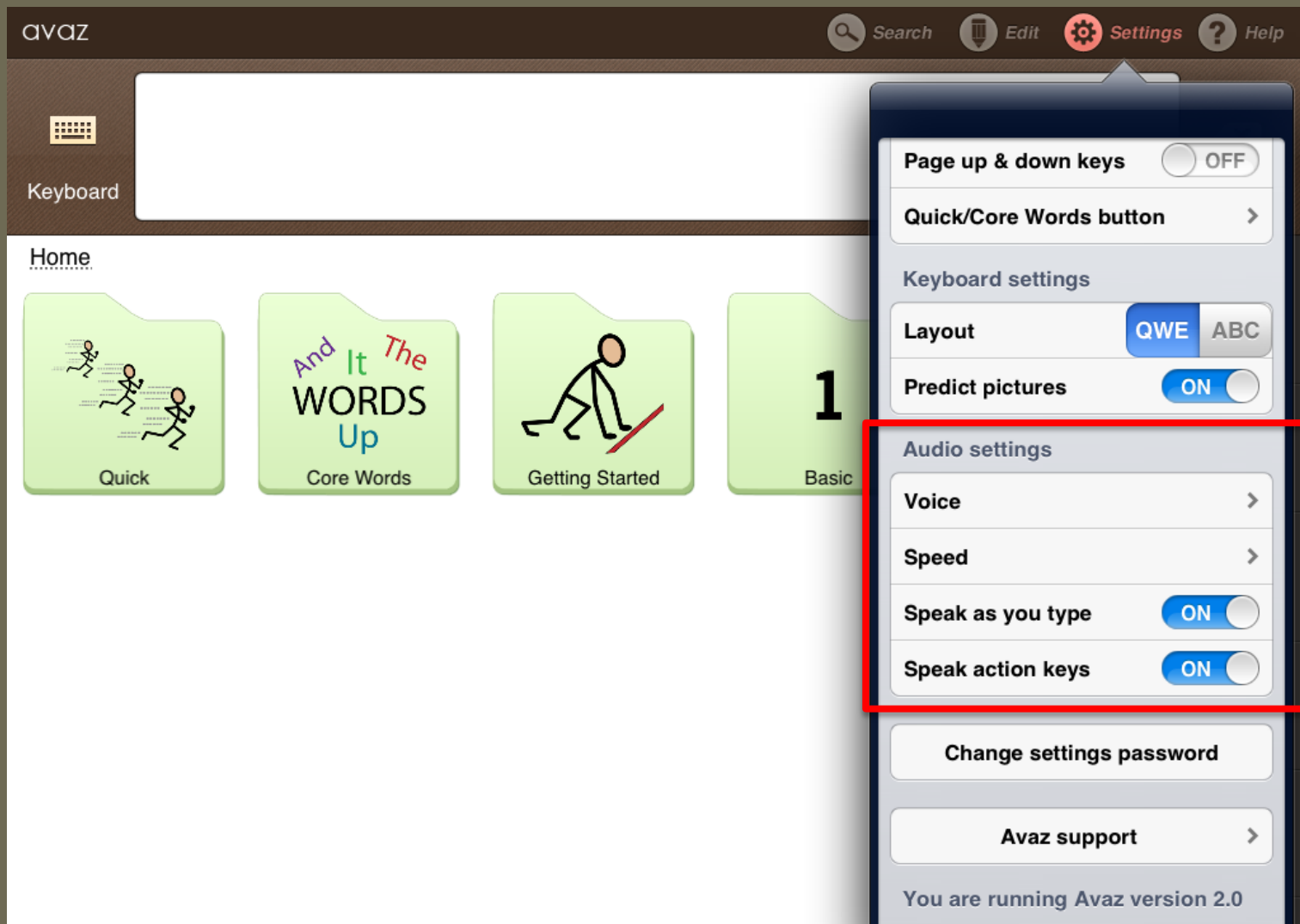


Puoi personalizzare la voce e la velocità della sintesi vocale. Scegli cosa verbalizzare quando digiti, o scegli di verbalizzare tutto alla fine della composizione del messaggio. Puoi anche scegliere se verbalizzare alla selezione le funzioni di alcuni tasti come “Tastiera”, “Inizio”, “Indietro”, ecc.

Opzioni della voce

The screenshot displays the Avaz application interface. At the top, the 'avaz' logo is on the left, and navigation icons for 'Search', 'Edit', 'Settings', and 'Help' are on the right. Below the logo is a 'Keyboard' icon and a text input field. The main content area is titled 'Home → Advanced' and features a grid of word cards. Each card contains an illustration and a word: 'I' (stick figure), 'you' (two stick figures), 'that' (hand pointing to a red square), 'do' (stick figure), 'is' (equals sign), 'like' (smiling face), 'want' (stick figure with a red box), 'to' (arrow), 'food' (apple, carrot, bread), 'indoor' (stick figures playing board games), 'places' (maps), and 'people' (group of faces). A dark blue menu is open on the right, titled 'Back', listing voice options: 'Ryan (US Male)', 'Laura (US Female)' (selected with a checkmark), 'Kenny (US Child)', 'Nelly (US Child)', 'Deepa (Indian Female)', 'Graham (British Male)', and 'Lucy (British Female)'.

Avaz utilizza voci naturali di alta qualità Acapela. Scegli la voce in base al sesso dell'utilizzatore.

Protezione con password

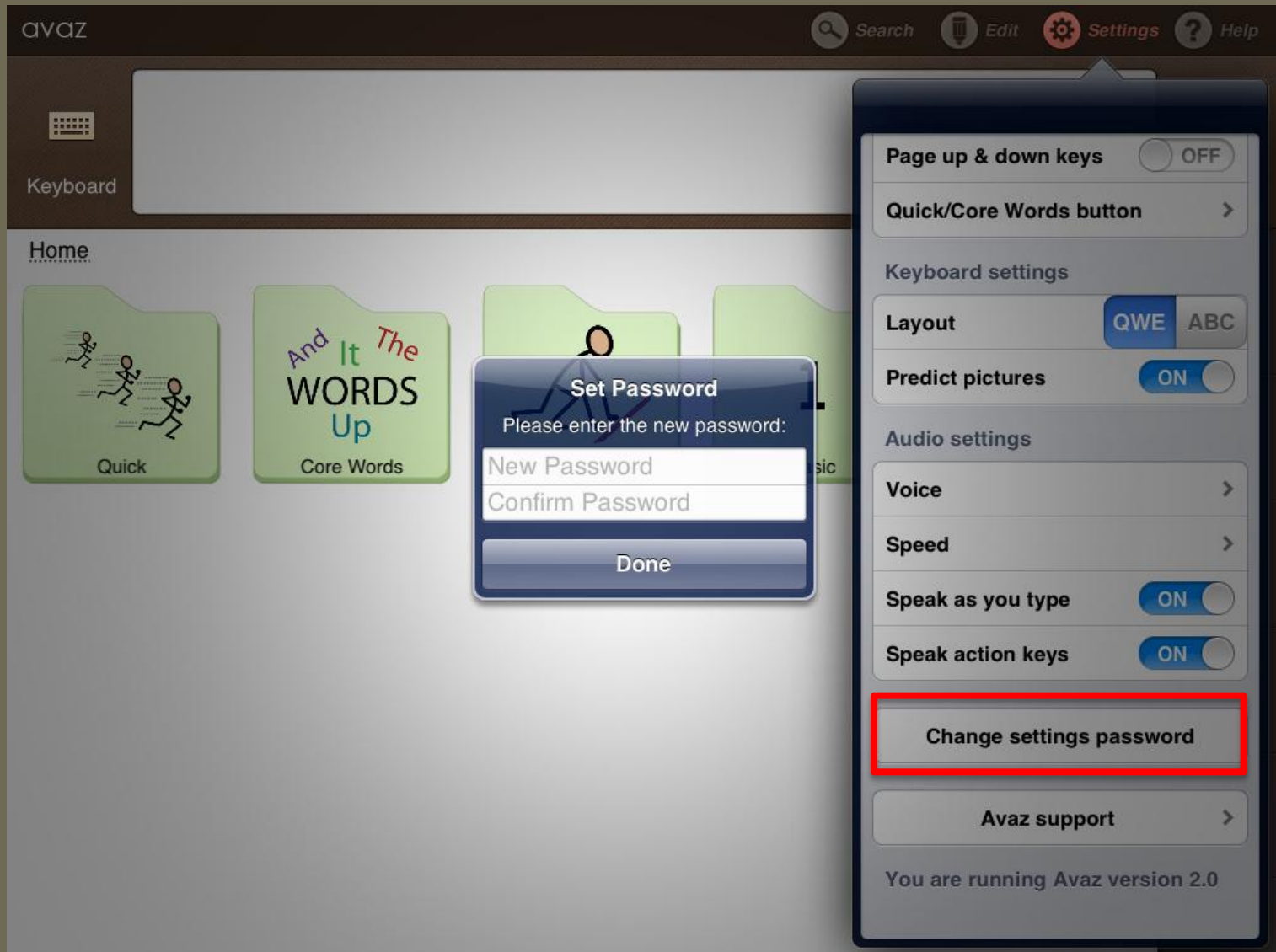

Limita l'accesso al menu "Modifica" ed al menu "Impostazioni" con una password, per evitare modifiche accidentali.

Domande? Feedback? Suggestimenti?

contattaci:
support@avazapp.com

Seguici:
www.facebook.com/avazapp
www.twitter.com/avazapp